

#### **Erstellung der Bedienungsanleitung:**

**03/2009**

Dieses Gerät wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und findet gemäß Bedienungsanleitung Einsatz. Für Schäden, die sich aus anderweitiger Verwendung oder nicht sachgemäßem Gebrauch ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Darüber hinaus ist der Verwender verpflichtet, das Gerät eigenverantwortlich vor dessen Einsatz auf Eignung und Verwendungsmöglichkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, zumal wenn diese Zwecke nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt sind. Dies gilt auch, wenn das Gerät in Kombination mit Produkten von Mitbewerbern angewendet wird.

Printed in Wendelstein

© Wegold Edelmetalle GmbH, Alte Salzstraße 9, 90530 Wendelstein / Germany

Telefon 09129 / 4030-0, Telefax 09129 / 4030-40

[info@wegold.de](mailto:info@wegold.de), [www.wegold.de](http://www.wegold.de)

QMF 4.5-607 DE Rev. h vom 06.09.2010



## Bedienungsanleitung Conicid

## 1 Vorwort

Wir gratulieren zum Erwerb Ihres Conicid. Bitte nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und lesen Sie diese Gebrauchsanweisung gründlich durch, um dieses neue Gerät optimal zu nutzen.

*Bewahren Sie diese  
Bedienungsanleitung  
unbedingt auf.*

## 2 Sicherheitshinweise

**WARNUNG** - Um das Risiko eines elektrischen Schlages, von Verbrennungen, Feuer oder Verletzungen von Personen zu vermeiden, beachten Sie bitte folgendes:



Bitte beachten Sie die  
Sicherheitshinweise

Benutzen Sie das Gerät nur zu dem Zweck der in der Bedienungsanleitung dargelegt ist.

Benutzen Sie das Gerät niemals mit einem schadhaften Kabel oder Stecker.

Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht in die Nähe von Hitzequellen gelangt.

Schalten Sie das Gerät bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten ab und entfernen Sie das Netzkabel



Dieses Produkt darf nicht in den Hausmüll geworfen werden. Bitte entsorgen Sie das Produkt in gekennzeichneten Recyclinghöfen oder schicken Sie es an die Wegold Edelmetalle AG.

**Haftungsausschluss:**

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eigenmächtige Veränderungen sowie durch missbräuchliche oder andere, von der Gebrauchsanleitung abweichende Verwendung entstanden sind.

### 3 Erste Inbetriebnahme

### 3.1 Auspacken

Kontrollieren Sie die Verpackung und das Gerät auf Transportschäden. Bei Beschädigungen informieren Sie uns bitte sofort vor dem weiteren Auspacken unter der Telefonnummer 0 91 29 / 40 30-0.

Nehmen Sie das Conicid aus der Verpackung heraus und stellen Sie es auf eine ebene Oberfläche.

## 6 Notizen

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Nach dem Spülen das Werkstück aus dem Schwenksieb nehmen und den Deckel mit Schwenksieb sofort wieder auf das Gerät setzen. Sie vermeiden dadurch unnötiges Verdampfen von Wasser aus der Beizflüssigkeit.

Sollte dennoch einmal der Flüssigkeitsstand unter der Füllstandsmarkierung sein, muss das Bad mit Wasser aufgefüllt werden.

#### **Empfehlung:**

Wir empfehlen, die Säure je nach Verwendungshäufigkeit alle 10 bis 15 Tage zu wechseln.

Spätestens bei einer auftretenden Grünverfärbung sollte sie gewechselt werden.

## **5 Sonstige Hinweise**

### **5.1 Reinigung**

Das Design erlaubt eine leichte Reinigung des Kunststoffgehäuses. Bitte verwenden Sie ausschließlich einen feuchten, weichen Lappen ohne Reinigungsmittel.

### **5.2 Kundendienst**

Ihr Gerät wurde sorgfältig gefertigt und vor der Auslieferung gewissenhaft geprüft. Sollten im Laufe der Zeit Fehlfunktionen auftreten oder Reparaturen nötig sein, verständigen Sie bitte Ihren Wegold-Kundendienst unter der Telefonnummer: 09129 / 40 30—0.

### **5.3 Gewährleistung**

Die Gewährleistung für Ihr Gerät beträgt 1 Jahr.

### **5.4 Haftung**



Wir übernehmen keinerlei Haftung für evtl. Druckfehler in vorliegender Bedienungsanleitung. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die dem technischen Fortschritt dienen.

## **3.2 Lieferumfang**

- 1 x Conicid inkl. Netzkabel
- 1 x Keramiksieb
- 2 x Pulverbeutel Wegocid à 65 g

Kontrollieren Sie bitte unbedingt den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

## **3.3 Geräteansicht und Bezeichnungen**

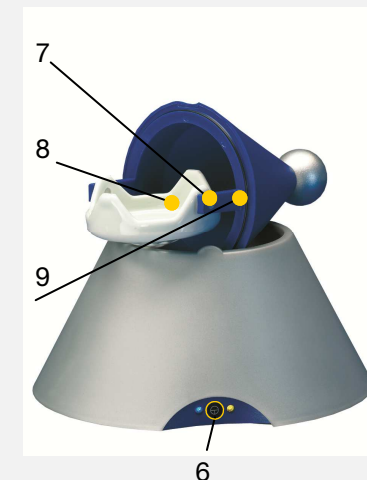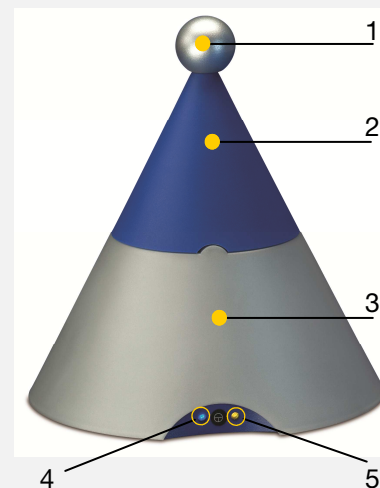

#### **Bedienelemente:**

- 1 Handgriff
- 2 Deckel
- 3 Beizgefäß
- 4 Leuchte „betriebsbereit“
- 5 Leuchte „Heizfunktion“
- 6 Ein-/Aus-Taste
- 7 Kunststoffzapfen
- 8 Keramiksieb
- 9 Haltebügel

### 3.4 Technische Daten

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Breite        | 220 mm                               |
| Tiefe         | 220 mm                               |
| Höhe          | 240 mm                               |
| Gewicht       | 1 kg                                 |
| Netzspannung  | 230 V; 50/60 Hz                      |
| Anschlusswert | 130 W                                |
| Schutzklasse  | IP 43<br>(Schutz gegen Spritzwasser) |

### 3.5 Lagerhinweise

Die Lagertemperatur des Gerätes ist von -10 °C bis +40 °C festgelegt. Das Gerät darf nicht gestürzt werden.

*Lagertemperatur  
beachten*

### 3.6 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Beizgerät Conicid wurde für das werkstoffgerechte Absäuern (Desoxidieren) von Edelmetall-Werkstücken unter Verwendung des Wegold Beizmittels Wegocid entwickelt (Hinweise zu Wegocid finden Sie in dem Beipackzettel zu Wegocid).

Die thermostatische Steuerung des elektrisch beheizten Gerätes und der damit verbundene geringe Stromverbrauch, gestatten eine Dauerbeheizung während des ganzen Arbeitstages. Beizvorgänge können somit zu jeder Zeit und in schneller Folge durchgeführt werden.

Das mit dem Gerätedeckel verbundene Keramiksieb macht den Gebrauch von Stahlpinzetten o. ä. Werkzeug für den Transport der Werkstücke überflüssig.

Das Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden.

### 3.7 Inbetriebnahme/Einschalten des Gerätes

Um ein Kippen des Behälters oder das Verschütten von Beizflüssigkeit zu verhindern, stellen Sie das Gerät bitte an einem sicheren, ebenen Standort auf.

Das Keramiksieb durch leichtes Auseinanderbiegen der Haltebügel in den Deckel einhängen. Die Kunststoffzapfen müssen dabei in die Löcher des Keramiksiebes greifen. Den bei-

Vor der ersten Inbetriebnahme den Beizbehälter mit 250 cm<sup>3</sup> Wasser füllen, das Gerät an das Stromnetz anschließen und einschalten. Zur Kontrolle der Betriebsbereitschaft leuchtet die blaue LED.

#### Achtung

Zum Auffüllen des Conicid bitte niemals heißes oder kochendes Wasser nehmen. Dies kann zu Defekten des Thermoelementes führen und fällt nicht unter die Gewährleistung.

**Zum Auffüllen verwenden Sie bitte nur kaltes oder lauwarmes Wasser.**



Nach ca. 20 Minuten einen Beutel mit 65 Gramm Wegocid in das erwärmte Wasser schütten und mit einem Glas- oder Holzstab umrühren, bis das Pulver restlos aufgelöst ist. Die Beizflüssigkeit erreicht eine optimale Arbeitstemperatur von ca. 72 °C.

### 3.8 Ausschalten des Gerätes

Drücken Sie die „Ein-/Aus-Taste“ - die Kontrollleuchte „Betriebsbereit“ (4) erlischt.

Nach dem Abkühlen der Heizung (ca. 1 Minute) erlischt dann auch die Kontrollleuchte „Heizfunktion“ (5).

## 4 Bedienung

Zum Beizen den Deckel senkrecht hochheben, das Werkstück in das Schwenksieb einlegen und das Conicid wieder schließen.

⇒ **ACHTUNG:**  
HEISSE OBJEKTE KÖNNEN ZUM VERSPRITZEN  
VON SÄURE FÜHREN!

Wir empfehlen, die gebeizten Werkstücke möglichst unter fließendem Wasser zu spülen. Dieser Arbeitsgang lässt sich mit dem Beizgerät Conicid schnell durchführen. Der Beizbehälter mit der Beizflüssigkeit bleibt am Arbeitsplatz stehen.

*Tropfschutz*

Nutzen Sie den Deckel als Tropfschutz beim Transport der Werkstücke zum Wasserhahn.

⇒ **Metallpinzetten auf keinen Fall in die Säure tauchen**, da dies zu Verfärbungen auf den Gussobjekten