

Erstellung der Bedienungsanleitung:

03/2009

Dieses Gerät wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und findet gemäß Bedienungsanleitung Einsatz. Für Schäden, die sich aus anderweitiger Verwendung oder nicht sachgemäßem Gebrauch ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Darüber hinaus ist der Verwender verpflichtet, das Gerät eigenverantwortlich vor dessen Einsatz auf Eignung und Verwendungsmöglichkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, zumal wenn diese Zwecke nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt sind. Dies gilt auch, wenn das Gerät in Kombination mit Produkten von Mitbewerbern angewendet wird.

Printed in Wendelstein

© Wegold Edelmetalle AG, Alte Salzstraße 9, 90530 Wendelstein / Germany

Telefon 09129 / 4030-0, Telefax 09129 / 4030-40

info@wegold.de, www.wegold.de

QMF 4.5-626 DE Rev. f vom 31.07.2009



Bedienungsanleitung Rührei

1 Vorwort

Wir gratulieren zum Erwerb Ihres Rührer. Bitte nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und lesen Sie diese Gebrauchsanweisung gründlich durch, um dieses neue Gerät optimal zu nutzen.

2 Sicherheitshinweise

WARNUNG - Um das Risiko eines elektrischen Schlages, von Verbrennungen, Feuer oder Verletzungen von Personen zu vermeiden, beachten Sie bitte folgendes:

Benutzen Sie das Gerät nur zu dem Zweck der in der Bedienungsanleitung dargelegt ist.

Benutzen Sie das Gerät niemals mit einem schadhaften Kabel oder Stecker.

Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht in die Nähe von Hitzequellen gelangt.

Schalten Sie das Gerät bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten ab und entfernen Sie das Netzkabel

Dieses Produkt darf nicht in den Hausmüll geworfen werden. Bitte entsorgen Sie das Produkt in gekennzeichneten Recyclinghöfen oder schicken Sie es an die Wegold Edelmetalle AG.

Haftungsausschluss:

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eigenmächtige Veränderungen sowie durch missbräuchliche oder andere, von der Gebrauchsanleitung abweichende Verwendung entstanden sind.

3 Erste Inbetriebnahme

3.1 Auspacken

Kontrollieren Sie die Verpackung und das Gerät auf Transportschäden. Bei Beschädigungen informieren Sie uns bitte sofort vor dem weiteren Auspacken unter der Telefonnummer 0 91 29 / 40 30-0.

Nehmen Sie das Rührei aus der Verpackung heraus und stellen Sie es auf eine ebene Oberfläche.

*Bewahren Sie diese
Bedienungsanleitung
unbedingt auf.*



Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise



6 Notizen

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

3.2 Lieferumfang

- 1 x Rührer
1 x Netzkabel
1 x Tischständer oder 1 x Wandhalter (je nach Ausführung)
1 x Anrührbecher mit Deckel und Rührwerk (450 cm³)

Kontrollieren Sie bitte unbedingt den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

3.3 Technische Daten


Breite	290 mm
Tiefe	290 mm
Höhe	615 mm Tischversion 389 mm Wandversion
Gewicht	24 kg Tischversion 20 kg Wandversion
Netzspannung	230 V; 50/60 Hz
Anschlusswert	160 W
Rührdrehzahl	100-450 U/min
Vakuum	100 mbar
Förderleistung	11 l/min

3.4 Lagerhinweis

Die Lagertemperatur des Gerätes ist von -10 °C bis +40 °C festgelegt. Das Gerät darf nicht gestürzt werden.

Lagertemperatur
beachten

3.5 Geräteansicht und Bezeichnungen

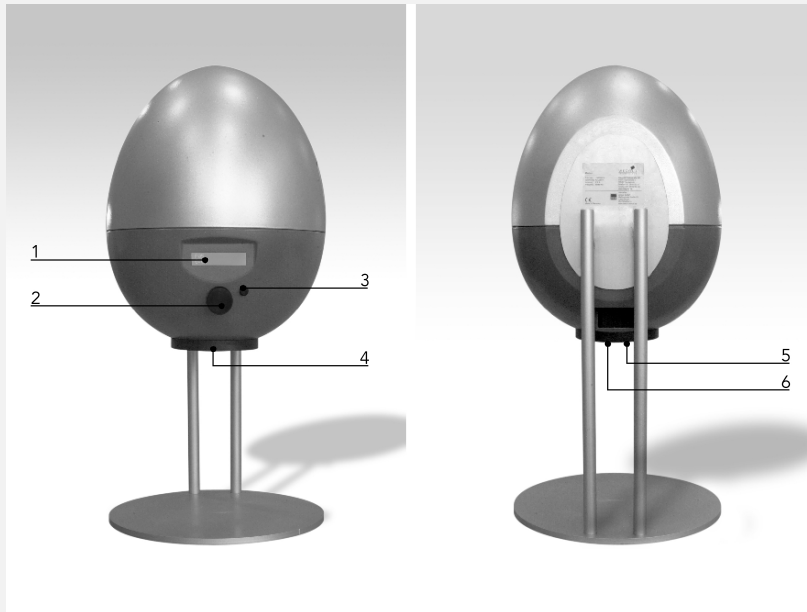

Bedienelemente:

- 1 Display
- 2 Multifunktionsknopf
- 3 Start-Stopp-Knopf
- 4 Aufnahme für Anrührbecher
- 5 Gerätesteckdose
- 6 Netzschalter

3.6 Inbetriebnahme

Netzanschluss:

Prüfen Sie bitte vor Anschluss des Gerätes, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Ihres Netzanschlusses übereinstimmt. Das Gerät muss mit dem Netzkabel an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Das Vakuumanrührgerät wurde zum Anrühren von dentalen Werkstoffen wie Gips, Einbettmasse, Silikon u. ä. entwickelt. Das Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden.

5 Sonstige Hinweise

5.1 Pflege des Gerätes

Das Design erlaubt eine leichte Reinigung des Kunststoffgehäuses. Bitte verwenden Sie ausschließlich einen feuchten, weichen Lappen ohne Reinigungsmittel.

5.2 Kundendienst

Ihr Gerät wurde sorgfältig gefertigt und vor der Auslieferung gewissenhaft geprüft. Sollten im Laufe der Zeit Fehlfunktionen auftreten oder Reparaturen nötig sein, verständigen Sie bitte Ihren Wegold-Kundendienst unter der Telefonnummer: 09129 / 40 30—0.

5.3 Gewährleistung

Die Gewährleistung für Ihr Gerät beträgt 1 Jahr.

5.4 Haftung

Wir übernehmen keinerlei Haftung für evtl. Druckfehler in vorliegender Bedienungsanleitung. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die dem technischen Fortschritt dienen.

Wenn Sie nun den Multifunktionsknopf eine Stellung weiterdrehen, erhalten Sie folgende Anzeige:

zurück

Drücken Sie den Multifunktionsknopf nun einmal kurz und Sie gelangen zur Programmwahl zurück und haben somit die Programmeingabe abgeschlossen.

4.3 Programmwahl

Drehen Sie den Multifunktionsknopf bis zum gewünschten Programm. Nehmen Sie nun den Anmischbecher mit dem anzurührenden Material darin und setzen Sie den Deckel mit Rührwerk darauf. Nun führen Sie ihn von unten in die Becherhalterung des Gerätes ein. Halten Sie den Becher mit einer Hand fest und starten Sie das Rührprogramm durch Drücken des Start-Stopp-Knopfes.

Das Rührei beginnt sofort ein Vakuum aufzubauen. Nach ein paar Sekunden erscheint im Display die Anzeige „Vak O.K.“. Jetzt können Sie den Becher loslassen.


Nach Ablauf des Programmes ertönt ein Signalton. Halten Sie eine Hand unter den Anrührbecher und betätigen Sie erneut den Start-Stopp-Knopf, um das Programm zu beenden. Das Vakuum wird aufgelöst und es erscheint „Belüften“ auf dem Display.

Sobald das Vakuum aufgehoben wurde, löst sich der Becher automatisch aus der Halterung.

3.7 Aufstellung und Montage des Gerätes

Aufstellung mit Standfuß

Standfuß

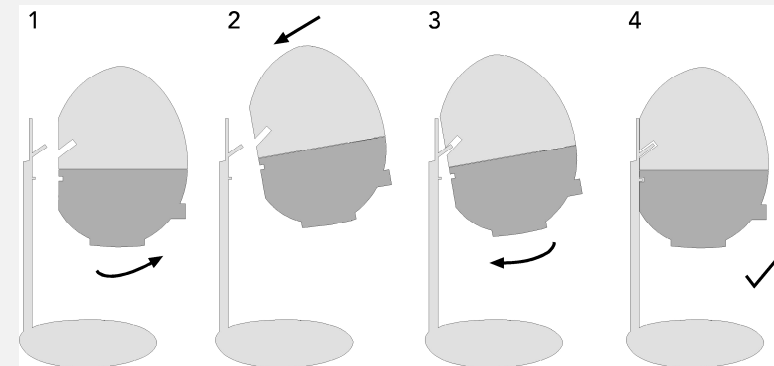

Montage mit Wandhalterung:

Wandhalterung

Prüfen Sie vor der Montage, ob sich das beigelegte Befestigungsmaterial für den vorhandenen Untergrund eignet. Sollte es sich um etwas anderes als Mauerwerk handeln (z. B. Gipskarton, Holz o. a.) müssen Sie im Fachhandel geeignetes Befestigungsmaterial besorgen. Zeichnen Sie mit Hilfe der Wandhalterung die Markierungen für die zu bohrenden Löcher an die Wand. Achten Sie darauf, die Halterung unter Zuhilfenahme einer Wasserwaage gerade zu montieren. Befestigen Sie nun die Wandhalterung mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben an der Wand.

Das Gerät wird nun genauso auf die Halterung gesetzt wie auf der Abbildung oben gezeigt.

4 Bedienung

Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter (6) auf der Geräteunterseite neben der Gerätesteckdose ein. Jetzt können Sie Anrührprogramme analog der Vorgaben der Hersteller eingeben.

4.1 Sprachauswahl

Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Programmwahlmodus befinden. Drücken Sie den Multifunktionsknopf (2) und halten ihn gedrückt bis in der oberen Zeile ein „*“ erscheint. Sie haben jetzt 3 Sekunden Zeit durch erneutes kurzes Drücken in die Sprachauswahl zu gelangen.

Durch Drehen des Multifunktionsknopfes (2) können Sie nun die gewünschte Sprache auswählen und durch kurzes Drücken des Multifunktionsknopfes (2) bestätigen.

4.2 Programmeingabe

Bei der Programmeingabe kommt ausschließlich der große Multifunktionsknopf (2) zur Anwendung. Durch seine Dreifachfunktion ist es äußerst einfach, Programme einzugeben. Generell gilt:

Kurzes Drücken:	Eingabeaufforderung aktivieren Eingabe bestätigen
Langes Drücken:	Beenden der Programmierung
Drehen:	Einstellen des Wertes, Wechsel zwischen Programmen und Programmpunkten

In der folgenden Programmieranleitung wird ein Beispielprogramm eingegeben. Folgen Sie dieser Anleitung Schritt für Schritt und ändern Sie die Programmparameter entsprechend ab.

In der linken Spalte wird beschrieben, welcher Schritt durchzuführen ist. Die rechte Spalte zeigt die entsprechende Anzeige im Display:

Programmieranleitung:

Wählen Sie durch Drehen des Multifunktionsknopfes einen freien Programmplatz

*P05
0:00*

Drücken Sie den Multifunktionsknopf einmal kurz:

Programm-Name

Drücken Sie den Knopf einmal kurz. In der unteren Zeile erscheint nun ein Cursor.

*Programm-Name
E_*

Drehen Sie nun am Multifunktionsknopf um den ersten Buchstaben des Programmnamens einzugeben.

*Programm-Name
EINBETTMASSE_*

Der Cursor springt nach Bestätigen durch einen kurzen Druck auf den Multifunktionsknopf automatisch um eine Position nach rechts. Wiederholen Sie diese Schritte bis der Name des Programmes komplett ist.

Durch Gedrückt-Halten oder wiederholtes kurzes Drücken des Multifunktionsknopfes bis der Cursor verschwindet, ist die Eingabe des Programmnamens beendet. Drehen Sie nun den Multifunktionsknopf im Uhrzeigersinn. Es erscheint:

*Vor-Evakuieren
aus*

Drücken Sie den Multifunktionsknopf einmal kurz. In der zweiten Zeile erscheint ein „größer“-Zeichen (>). Dieses Zeichen bedeutet, dass der aktuelle Wert jetzt geändert werden kann.

*Vor-Evakuieren
> aus*

Jetzt kann durch Drehen des Multifunktionsknopfes ein Wert zwischen 2 und 60 Sekunden eingestellt werden. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch einen kurzen Knopfdruck. Drehen Sie nun den Multifunktionsknopf wieder einen Schritt weiter im Uhrzeigersinn:

*Vormischen
aus*

Drücken Sie nun wieder den Multifunktionsknopf, um das Eingabefeld zu aktivieren:

*Vormischen
> aus*

Jetzt können Sie durch Drehen des Multifunktionsknopfes einen Wert zwischen 5 und 20 Sekunden eingeben. Bestätigen Sie die Eingabe wiederum durch einen Knopfdruck.

Vormischen 5 sec.

Durch Weiterdrehen des Multifunktionsknopfes gelangen Sie zum nächsten Punkt:

*Intervallzeit
aus*

Hier können Sie einstellen, ob das Rührwerk die Drehrichtung während des Anmischvorgangs in bestimmten Intervallen ändern soll. Sie können durch drücken und drehen des Multifunktionsknopfes einen Wert zwischen 2 und 20 Sekunden eingeben.

*Intervallzeit
10 sec*

Nachdem Sie die Eingabe durch drücken des Multifunktionsknopfes bestätigt haben, gelangen Sie durch Drehen zum nächsten Programmpunkt:

*Drehzahl
100 U/min*

Drücken Sie den Multifunktionsknopf und geben Sie durch Drehen einen Wert zwischen 100 und 450 Umdrehungen pro Minute ein. Bestätigen Sie die Eingaben wieder durch einen kurzen Knopfdruck:

*Drehzahl
350 U/min*

Drehen Sie den Multifunktionsknopf im Uhrzeigersinn zum nächsten Programmpunkt:

*Rührzeit
0:00*

Drücken Sie den Multifunktionsknopf einmal kurz, um einen Wert zwischen 0:00 und 5:00 Minuten einzugeben und bestätigen Sie die Eingabe durch einen kurzen Knopfdruck:

*Rührzeit
1:00*