

**Erstellung der Bedienungsanleitung:
03/2009**

Dieses Gerät wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und findet gemäß Bedienungsanleitung Einsatz. Für Schäden, die sich aus anderweitiger Verwendung oder nicht sachgemäßem Gebrauch ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Darüber hinaus ist der Verwender verpflichtet, das Gerät eigenverantwortlich vor dessen Einsatz auf Eignung und Verwendungsmöglichkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, zumal wenn diese Zwecke nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt sind. Dies gilt auch, wenn das Gerät in Kombination mit Produkten von Mitbewerbern angewendet wird.

Printed in Wendelstein

© Wegold Edelmetalle GmbH, Alte Salzstraße 9, 90530 Wendelstein / Germany

Telefon 09129 / 4030-0, Telefax 09129 / 4030-40

info@wegold.de, www.wegold.de

QMF 4.5-605 DE Rev. f vom 28.06.2011



Bedienungsanleitung Rüttler

1 Vorwort

Wir gratulieren zum Erwerb Ihres Rüttler. Bitte nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und lesen Sie diese Gebrauchsanweisung gründlich durch, um dieses neue Gerät optimal zu nutzen.

*Bewahren Sie diese
Bedienungsanleitung
unbedingt auf.*

2 Sicherheitshinweise

WARNUNG - Um das Risiko eines elektrischen Schlages, von Verbrennungen, Feuer oder Verletzungen von Personen zu vermeiden, beachten Sie bitte folgendes:



Bitte beachten Sie die
Sicherheitshinweise

Benutzen Sie das Gerät nur zu dem Zweck der in der Bedienungsanleitung dargelegt ist.

Benutzen Sie das Gerät niemals mit einem schadhaften Kabel oder Stecker.

Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht in die Nähe von Hitzequellen gelangt.

Schalten Sie das Gerät bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten ab und entfernen Sie das Netzkabel



Dieses Produkt darf nicht in den Hausmüll geworfen werden. Bitte entsorgen Sie das Produkt in gekennzeichneten Recyclinghöfen oder schicken Sie es an die Wegold Edelmetalle AG.

Haftungsausschluss:

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eigenmächtige Veränderungen sowie durch missbräuchliche oder andere, von der Gebrauchsanleitung abweichende Verwendung entstanden sind.

3 Erste Inbetriebnahme

3.1 Auspacken

Kontrollieren Sie die Verpackung und das Gerät auf Transportschäden. Bei Beschädigungen informieren Sie uns bitte sofort vor dem weiteren Auspacken unter der Telefonnummer 0 91 29 / 40 30-0.

Nehmen Sie den Rüttler aus der Verpackung heraus und stellen Sie ihn auf eine ebene Oberfläche.

6 Notizen

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

5 Sonstige Hinweise

5.1 Wartung

Vorsicht: Bei Wartungsarbeiten und Beseitigung von Störungen - zuerst Gerät vom Netz trennen!

Bei der Konstruktion der Geräte wurde auf weitest gehende Wartungsfreiheit und leichte Austauschbarkeit der Ersatzteile geachtet.

Ein ansprechendes, geradliniges Design erlaubt eine leichte Reinigung des lackierten Gehäuses. Durch regelmäßige Reinigung und Behandlung mit Politur, behält der Lack seinen Glanz. Metallputzmittel sollten nicht verwendet werden. Gipsreste u. ä. sollten sofort - noch in weichem Zustand - entfernt werden.

Die Gummiabdeckung kann zur Reinigung vom Rütteltisch abgenommen werden. Beim Wiederaufziehen ist darauf zu achten, dass die Abdeckung mit dem Wulst um die Tischplatte herum greift, um ein Abheben während des Vibrierens zu verhindern.

5.2 Kundendienst

Ihr Gerät wurde sorgfältig gefertigt und vor der Auslieferung gewissenhaft geprüft. Sollten im Laufe der Zeit Fehlfunktionen auftreten oder Reparaturen nötig sein, verständigen Sie bitte Ihren Wegold-Kundendienst unter der Telefonnummer: 09129 / 40 30—0.

5.3 Gewährleistung

Die Gewährleistung für Ihr Gerät beträgt 1 Jahr.

5.4 Haftung

Wir übernehmen keinerlei Haftung für evtl. Druckfehler in vorliegender Bedienungsanleitung. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die dem technischen Fortschritt dienen.

3.2 Lieferumfang


- 1 x Rüttler
- 1 x Netzkabel
- 1 x Gummiauflage

Kontrollieren Sie bitte unbedingt den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

3.3 Technische Daten

Breite	275 mm
Tiefe	200 mm
Höhe	150 mm
Gewicht	5,6 kg
Netzspannung	230 V; 50/60 Hz
Anschlusswert	140 W

3.4 Geräteansicht und Bezeichnungen

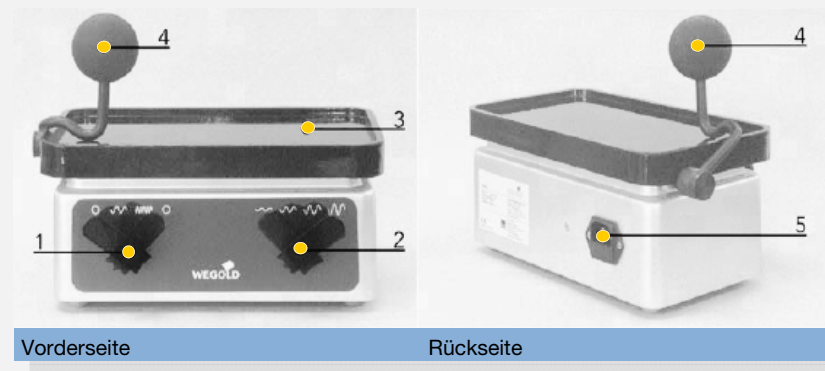

- 1 Netzschalter und Schwingungsfrequenzwahlschalter
- 2 Intensitätswahlschalter
- 3 Rütteltisch mit abnehmbarer Gummiauflage
- 4 Schwenkarm mit Auflagekugel
- 5 Kaltgerätebuchse mit integrierter Feinsicherung

3.5 Lagerhinweis

Die Lagertemperatur des Gerätes ist von -10°C bis + 40°C festgelegt. Das Gerät darf nicht gestürzt werden.

*Lagerhinweis
beachten*

3.6 Inbetriebnahme

Netzanschluss:

Prüfen Sie bitte vor Anschluss des Gerätes, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Ihres Netzanschlusses übereinstimmt.

Das Gerät muss mit dem Netzkabel an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.

Einsatzgebiet:

Der Wegold Rüttler eignet sich für das Einrütteln von Gipsen und Einbettmassen (Tischmaß 240 x 180 mm).

Die Schwingungsintensität kann in 4 Stufen mit dem Intensitätswahlschalter (2) eingestellt werden.

Die Schwingungsfrequenz lässt sich wahlweise auf 3000 oder 6000 pro Minute einstellen (Netzschalter und Schwingungsfrequenzwahlschalter - 1).

Die gute Standfestigkeit des Gerätes wird auf einer glatten Unterlage durch Spezialgummifüße erzielt.

gute Standfestigkeit

Anwendung:

Der Wegold Rüttler ermöglicht ein blasenfreies Einrütteln, sowohl von empfindlichen Einbettmassen als auch von Gipsen, die eine kräftige Vibration erfordern.

Durch die besondere Auslegung des Rütteltisches (3) wird eine gleichmäßige Vibration über die gesamte Arbeitsfläche gewährleistet. Der Wegold Rüttler ist mit einem schwenkbaren Rüttelarm mit aufgesetzter Gummikugel (4) für das Arbeiten mit Abformlöffeln ausgestattet.

*Gleichmäßige
Vibration*

4 Bedienung

Das Gerät wird mit dem Netzschalter (1) in Betrieb genommen, wobei gleichzeitig mit dem Einschalten die Schwingungsfrequenz 3000 oder 6000 gewählt werden kann.

Je nach Anwendungsfall kann bei dem Gerät die Schwingungsintensität über den Intensitätsschalter (2) verändert werden. Dieser Schalter wird durch Drehen auf die gewünschte Schwingungsintensität (Stufen 1-4) eingestellt:

*Einstellen der
Schwingungsintensität*

- Stufe 1: geringste Intensität
- Stufe 4: höchste Intensität

Der gesamte Rütteltisch (3) wird nun in gleichmäßige Schwingungen versetzt und dient als Auflage für Küvetten, Muffelringe o. ä.

Die Gummiauflage des Rütteltisches (3) ist aus hochwertigem, sehr elastischem und strapazierfähigem Material hergestellt. Diese Ausführung gewährleistet Ihnen:

1. die gewünschte Dämpfung
2. eine lange Lebensdauer

Auflagekugel

Die seitliche Kugel am Gerät dient als Auflage für Abformlöffel. Durch die Kugelform kann man den Abformlöffel in alle Richtungen drehen. Der Gips verteilt sich besser und schneller.

*Auflage für
Abformlöffel*