

Hersteller/Vertrieb:  
**Vita Zahnfabrik**

Produkt:  
 VITAVM LC

Indikation:  
 Verblenden



Mit dem lichthärtenden Mikropartikel-Komposit VITAVM LC können Kronen, Brücken und Teleskopkronen voll- und teilverblendet und VITA-Kunststoffzähne umgestaltet werden.

VITAVM LC BASIC besteht aus BASE DENTINE, ENAMEL und VITAVM LC OPAQUE

Die Masse ist standfest und besitzt nach dem Polymerisieren eine homogene und antagonistenfremdliche Oberfläche. Der Verbund Metall/Kunststoff wird durch den VITAVM BOND gesichert. Die elastische Verbundschicht wirkt wie ein Puffer zwischen Metall und Komposit und absorbiert einwirkende Kaukräfte.

Opaker und Dentinmassen sind farblich und konzeptionell aufeinander abgestimmt.

Die Mikropartikel sind in den gebrauchsfertigen Pasten fein verteilt und die Reproduktion der 3D-MASTER-Farben gelingt ausgezeichnet.

79704 Bad Säckingen  
 Telefon (0 77 61) 56 2-0



Hersteller/Vertrieb:  
**Wegold Edelmetalle**

Produkt:  
 Conicid

Indikation:  
 Absäuern


Mit seiner Kegelform ist das Beizgerät Conicid ein wahres Designerstück.

Der Temperaturmessfühler sitzt direkt an einem Kupferbecher, der von der elektrischen Aufheizeneinheit ummantelt ist. Die Temperaturüberwachung arbeitet unabhängig vom Füllstand der Beizflüssigkeit. Wird eine Temperatur von 68° C erreicht, schaltet das Gerät automatisch ab. Ein Durchbrennen bei zu geringem Füllstand ist ausgeschlossen. Das Beizsieb ist aus Keramik hergestellt.

90530 Wendelstein  
 Telefon (0 91 29) 40 30-171



www.kavo-everest.com

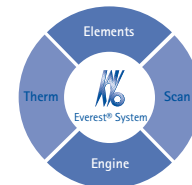

Materialvielfalt macht  
 unschlagbar.

Mit Everest® blanks für nahezu jede Indikation.

Weitere Fragen:  
 Hotline 01805-EVEREST (3837378)  
 www.kavo-everest.com



KaVo. Dental Excellence.

KaVo · D-88299 Leutkirch.  
 Telefon +497561 86-0 · Fax +497561 86-211  
 Internet: www.kavo.com